



*Sshh..*  
*Sshh..*

ho un segreto..

**ideal** Leone  
O LIGHT LINGUAL SYSTEM

# Il sistema linguale **Ideal Leone** è nato per trattare pazienti con lievi malposizioni o recidive che desiderano migliorare il loro sorriso con un trattamento invisibile, predicibile e veloce.



- Gli attacchi del sistema linguale **Idea-L** hanno minime dimensioni mesio-distali e uno spessore di solo 1,4 mm per assicurare il comfort e non alterare la fonasi del paziente fin dal primo giorno di trattamento.  
Il particolare design di questi brackets facilita l'applicazione della legatura **Slide™** e ne assicura il mantenimento della posizione durante la terapia.



- L'utilizzo della **Slide™** ha molteplici vantaggi:
  - **Slide™** si integra nel profilo dell'attacco e lo rende completamente privo di asperità
  - **Slide™** consente di sfruttare i vantaggi della biomeccanica Low Friction con l'applicazione di forze leggere
  - **Slide™** diminuisce i tempi terapeutici.



- Nella maggioranza dei casi l'impiego di un filo tondo **Memoria®** .012" risulta sufficiente per ottenere la risoluzione dell'affollamento ed il miglioramento estetico del sorriso.


In presenza di rotazioni dentali e/o malposizionamenti più marcati si possono adottare sia fili di dimensioni maggiori, **Memoria®** o Beta **Memoria®**, sia legature convenzionali frizionanti per aumentare il controllo biomeccanico.



- La sistemica **Idea-L**, progettata per una biomeccanica 2D con utilizzo di soli fili tondi non richiede complicati e costosi set up dei modelli.



- Per ottenere il perfetto allineamento e livellamento dei denti frontali è necessario un accurato posizionamento dei brackets; è quindi consigliabile una metodica indiretta sia con mascherine realizzate in laboratorio sia con i "Jig" appositamente ideati.
- La serie di altimetri di plastica è realizzata in sei misure per consentire la scelta della posizione più corretta in virtù dell'anatomia della superficie linguale del dente.

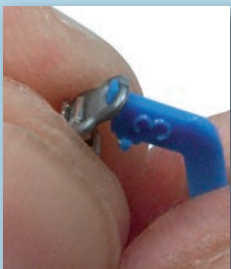


- Assemblaggio del Jig sull'attacco con la **Slide** agganciata sulla aletta gengivale




- Verifica sul modello della misura del Jig scelto



- Posizionamento in bocca e polimerizzazione dell'adesivo

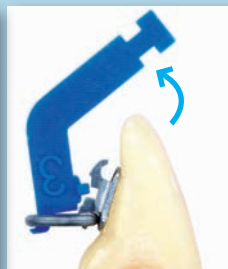

- Rimozione del Jig con un movimento rotatorio

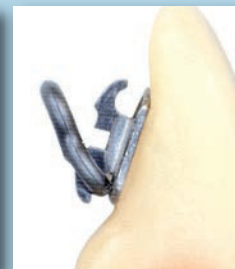

- Attacco con la **Slide** inserita nell'aletta gengivale



- Attacco con il filo inserito e la **Slide** in posizione

..porto  
un apparecchio  
ortodontico..

lo diresti?

ideal Leone  
O LIGHT LINGUAL SYSTEM

Inizio terapia



Risultato clinico dopo 3 mesi



- Cosmesi ortodontica del sorriso veloce ed invisibile per la cura di lievi malposizioni e recidive
- Biomeccanica Low Friction 2D per allineare e livellare i denti anteriori in poche settimane
- Attacchi di piccole dimensioni e ridotto spessore, utilizzati con legature **Slide™**, assicurano il massimo comfort del paziente
- Posizionamento pratico e preciso con lo specifico sistema di trasferimento
- Efficace alternativa agli aligners trasparenti
- Massimo rispetto della fonesi
- Minima collaborazione del paziente

Inizio terapia



Risultato clinico dopo 3 mesi



SISTEMA IDEA-L					
			torque	ang.	
					 .018"
				0°	$\frac{1}{1}$ F4980-04
				0°	$\frac{2}{2}$ F4980-04
				0°	$\frac{3}{3}$ F4980-04
				0°	$\frac{4}{4}$ F4984-04
				0°	$\frac{1}{1}$ F4980-04
				0°	$\frac{2}{2}$ F4980-04
				0°	$\frac{3}{3}$ F4980-04
				0°	$\frac{4}{4}$ F4984-04


## Attacchi linguali IDEA-L

Confezioni da 5 pezzi



## F4980-91 Kit attacchi linguali IDEA-L

Il kit contiene 8 attacchi (una arcata) e 12 legature *Slide*<sup>TM</sup>\* extra-small, colore argento

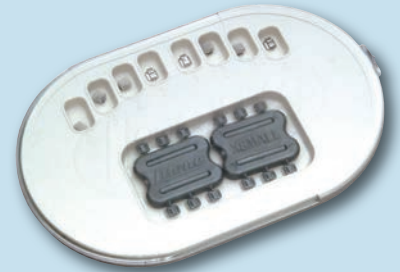

ALTIMETRI PER ATTACCHI IDEA-L		
misura	codice	
1	F4900-01	conf. 20
2	F4900-02	
3	F4900-03	
4	F4900-04	
5	F4900-05	
6	F4900-06	



## F4900-60 Kit altimetri per attacchi linguali IDEA-L


Confezione assortita da 120 pezzi



## K6264-10 Legature *Slide*<sup>TM</sup>\* argento extra-small

Confezione da 10 moduli, da 6 legature ciascuno

ARCHI LINGUALI MEMORIA®				conf. 2
Ø inch	piccoli	medi	grandi	
.012	C4950-12	C4951-12	C4952-12	
.014	C4950-14	C4951-14	C4952-14	
ARCHI LINGUALI BETA MEMORIA®				conf. 2
.016	C4970-16	C4971-16	C4972-16	

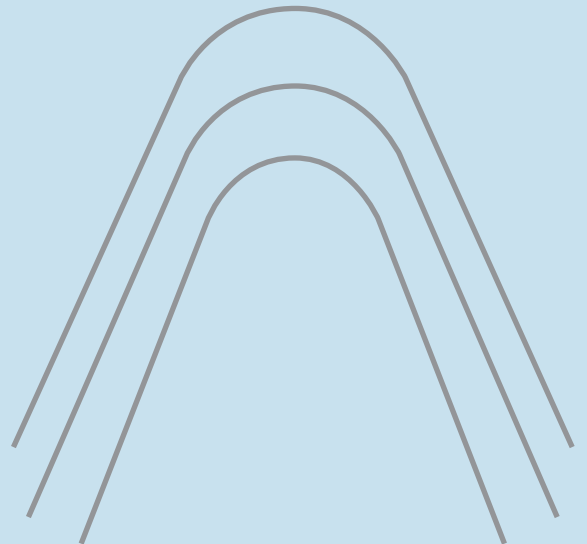

ideal  
O LIGHT LINGUAL SYSTEM

### LEONE S.p.a Ortodonzia e Implantologia

Via P. a Quaracchi, 50 - 50019 Sesto Fiorentino - FIRENZE - Tel. 055.30441 Fax 055.374808 info@leone.it www.leone.it

Ufficio Vendite Italia Tel. 055.304432 - 055.304433 Fax 055.374808 italia@leone.it