

MATERIAL PARA CLÍNICA Y LABORATORIO



R

Nuestra línea **LEOCRIL**® Arcobaleno se compone de un abanico de colores que se pueden mezclar entre sí o con aditivo fosforescente y brillantinas; accesorios y una serie de pegatinas para placas aumentarán la motivación de los pacientes más pequeños.

- **el bajo residuo de monómero libre**
en la masa acrílica polimerizada impide la formación de poros


- **mezcla facilitada**
debido al granulado del polvo mixing

- **tiempo de trabajo largo**
se trabaja esmeradamente sin temer
la activación de la reacción exotérmica

- **contracción muy reducida de los dos componentes**
prótesis estables en boca

- **máxima precisión**
óptima fricción de los tornillos

- **óptima dureza**
abrillantado fácil y perfecto

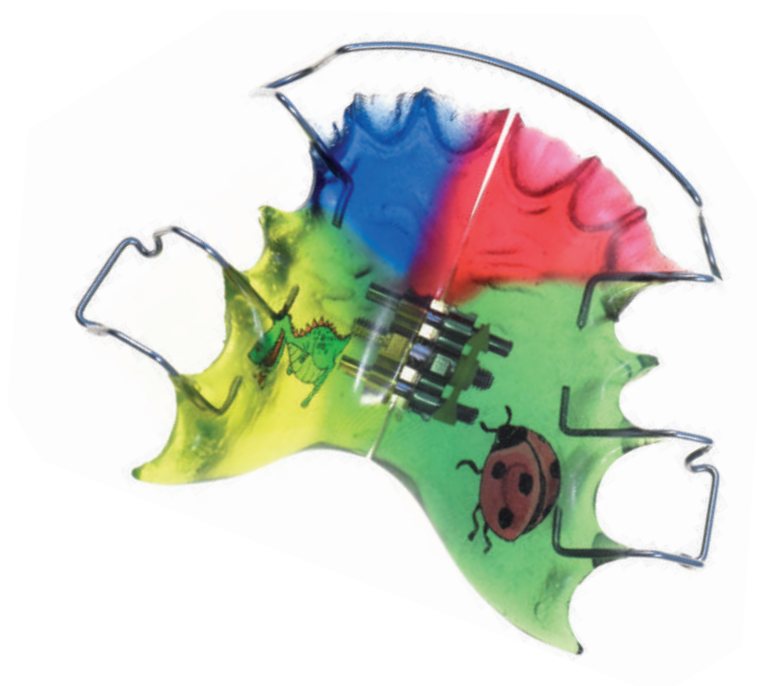



LEOCRYL® RESINA ORTODÓNTICA AUTOPOLIMERIZABLE

Expresamente estudiada para el uso ortodóntico, tanto en la técnica de saturación como en la técnica de sal y pimienta. La particular composición del líquido permite una cuidadosa elaboración, sin que inicie el proceso de polimerización, reacción exotérmica, que provocaría una indeseada evaporación del monómero. Se aconseja el uso de una hidromufla u olla de presión Leone para la polimerización a 40° C con una presión de 2,5 Atm durante 20 minutos. Se obtendrán así aparatos de dureza y acabado no posibles con otros métodos.

Envase estándar

- R6222-95** Neutro - A, líquido neutro A, polvo neutro
R6223-95 Rosa transparente - B, líquido rosa transp. B, polvo neutro

Contiene:

1 Kg de polvo, 0,5 L de líquido, dosificadores para polvo/ líquido con boquilla, embudos, medidores, aislante

Envase introducción - Indispensable en el laboratorio.

- R6202-93** Neutro - A, líquido neutro A, polvo neutro
R6203-93 Rosa transparente - B, líquido rosa transp. B, polvo neutro

Contiene:

60 gr de polvo, 45 ml de líquido



LEOCRYL® "ARCOBALENO" - LÍQUIDO



color		envase	
rojo	D	R6124-00	R6134-00
violeta	E	R6125-00	R6135-00
naranja	G	R6127-00	R6137-00
amarillo fluor.	H	R6128-00	R6138-00
verde	I	R6129-00	R6139-00
turquesa	L	R6130-00	R6140-00
azul	M	R6131-00	R6141-00



LEOCRYL® LÍQUIDO MONÓMERO

color		envase	
neutro	A	R6122-00	0,5 L
		R6142-02	1 L
rosa transparente	B	R6123-00	0,5 L
		R6143-02	1 L



LEOCRYL® POLVO POLÍMERO

Color neutro.

R6032-00

Envase: 1 Kg

R6042-00

Envase: 10 Kg



R6000-00 MUESTRARIO COLORES LEOCRYL® "ARCOBALENO"

Los colores son indicativos; pueden variar ligeramente con respecto a los de las placas obtenidas con la resina LEOCRYL®.



R4401-93
SURTIDO DE PEGATINAS
COLOREADAS PARA PLACAS

El kit contiene 28 diferentes motivos para insertar en la resina, pinzas para posicionarlos y un folleto para mostrar al paciente para la elección.



R4401-01



R4401-02



R4401-03



R4401-04



R4401-05



R4401-06



R4401-07



R4401-08



R4401-09



R4401-10



R4401-11



R4401-12



R4401-13



R4401-14



R4401-15



R4401-16



R4401-17



R4401-18



R4401-19



R4401-20



R4401-21



R4401-22



R4401-23



R4401-24



R4401-25



R4401-26



R4401-27



R4401-28

RECAMBIOS PEGATINAS Envase: 10 piezas



BRILLANTINAS

Placas más agradables mezclando una pequeña cantidad de brillantinas con el polvo. Las brillantinas convierten la placa en localizable en caso de radiografías.
Envase: 50 gr con dosificador

color	
plata	R4300-00
oro	R4301-00
arco iris "Z"	R4302-00
azul	R4303-00
rojo	R4304-00



R4310-00
ADITIVO FOSFORESCENTE "X"

Para obtener un efecto fosforescente bastará mezclar aproximadamente el 15% de este producto al polímero. Los mejores resultados se obtienen con polvo y líquido neutro como indicado en el muestrario.
Envase: 100 gr

ACCESORIOS

- R4401-00 Dosificador para polvo

R4402-00 Dosificador para líquido

R4403-00 Medidor grande

R4404-00 Medidor pequeño
- R4405-00 Embudo para líquido

R4406-00 Embudo para polvo

R4407-00 Pincel

R4408-00 Boquilla para polvo/líquido
- R4409-00 Aguja para líquido

R4410-00 Flechas



accesorios para resina - yeso para modelos ortodónticos



R6320-00
AISLANTE PARA RESINA

Envase: 1 L



R4550-00
ABRILLANTADOR PARA RESINA

Se usan pocas gotas dispersas sobre el cepillo de la pulidora.

Envase: 0,5 L

R3427-00

R3428-00

R3426-00



PUNTAS MONTADAS DE SILICONA

Para un perfecto abrillantado de las placas. No dañan los ganchos y arcos de alambre. Todas con madril de 2,35 mm de diámetro.

Envase: 6 piezas



YESO EXTRADURO

R5005-00

Bidón de 5 Kg



R5025-00

Bidón de 25 Kg

Yeso tipo III, color blanco nieve.

Relación de mezcla 26-28 ml: 100 gr.

Se obtienen modelos muy precisos, pulidos y de gran dureza: más de 650 Kg/cmq.

Fácilmente abrillantable con el producto R4520-00. Para modelos de trabajo y de archivo.



**ABRILLANTADOR
PARA MODELOS DE YESO**

R4520-00


Envase: 0,5 L



R4530-00

Envase: 5 L

Para obtener un buen modelo de museo, es necesario un buen yeso, pero también es indispensable un producto para el abrillantado final. Este abrillantador permite obtener superficies plásticas brillantes que evidencian las particularidades más menudas y protegen el modelo en el tiempo.

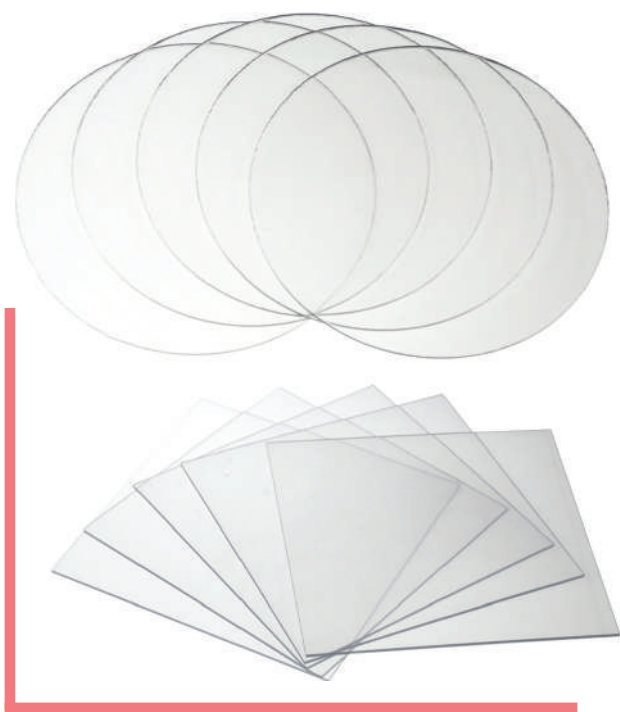

MATERIALE BIOCOMPATIBILE
TERMOFORMABILE

Los discos y las planchas cuadradas están realizados con PET-G (polietilentereftalato modificado con glicol) material para el termoformado, ideal para realizar alineadores dentales y contenciones estéticas post terapia. El material, conforme a la ISO 10993-1, posee excelentes características de transparencia óptica y, una vez formado, una elevada eficacia biomecánica.

DISCOS TERMOFORMABLES Ø 120 mm		
	espesor	envase
R7001-05	0,5 mm	25 pzas
R7001-08	0,8 mm	25 pzas
R7001-10	1,0 mm	25 pzas
R7001-15	1,5 mm	15 pzas
R7001-20	2,0 mm	10 pzas
new R7001-905	0,5 mm	1000 pzas
new R7001-908	0,8 mm	1000 pzas
new R7001-910	1,0 mm	1000 pzas



DISCOS TERMOFORMABLES Ø 125 mm		
	espesor	envase
R7002-05	0,5 mm	25 pzas
R7002-08	0,8 mm	25 pzas
R7002-10	1,0 mm	25 pzas
R7002-15	1,5 mm	15 pzas
R7002-20	2,0 mm	10 pzas
new R7002-908	0,8 mm	1000 pzas
new R7002-910	1,0 mm	1000 pzas





PLANCHAS TERMOFORMABLES 125 x 125 mm		
	espesor	envase
R7013-05	0,5 mm	25 pzas
R7013-08	0,8 mm	25 pzas
R7013-10	1,0 mm	25 pzas
R7013-15	1,5 mm	15 pzas
R7013-20	2,0 mm	10 pzas



MATERIAL BIOCOMPATIBLE TERMOFORMABLE HARD/SOFT

new

Los discos y las planchas cuadradas están caracterizadas por un lado blando y uno más rígido. El lado blando está realizado con EVA (Acetato de vinilo) mientras que el lado duro está realizado con PET-G (polietilentereftalato modificado con glicol). La resina acrílica se fusiona perfectamente con el lado rígido del material termoformable, lo que hace que este último sea adecuado para la fabricación de férulas oclusales y también como base en la fabricación de aparatos en resina, como por ejemplo los dispositivos antirronquido, para que asegure una confortable retención también en ausencia de ganchos metálicos. Una vez termoformado, el material tiene una alta resistencia a la rotura.

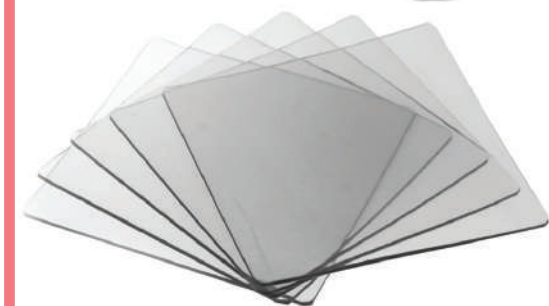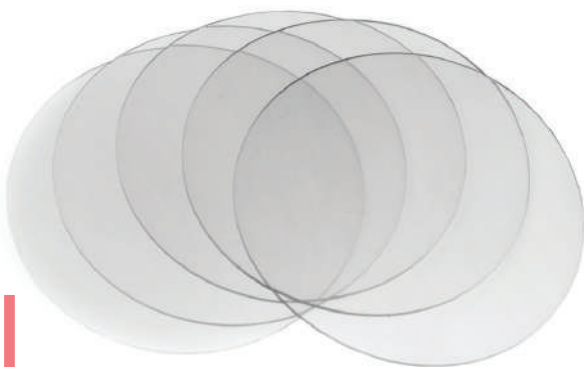

DISCOS HARD/SOFT Ø 120 mm

	espesor	envase
R7101-02	2 mm	10 pzas
R7101-03	3 mm	10 pzas



DISCOS HARD/SOFT Ø 125 mm


	espesor	envase
R7102-02	2 mm	10 pzas
R7102-03	3 mm	10 pzas



PLANCHAS HARD/SOFT 125x125 mm

	espesor	envase
R7113-02	2 mm	10 pzas
R7113-03	3 mm	10 pzas



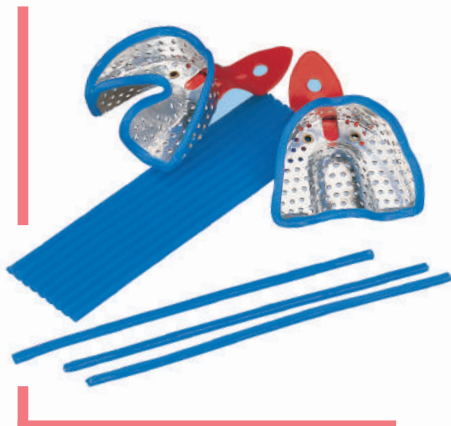

R3712-00
CERA PERFILADA CUADRANGULAR

Cera en bastoncitos de 25 cm de longitud, sección 3x3 mm.
Por su particular adherencia y ductilidad es apta para contornear las cubetas con el fin de respetar los bordes de impresión funcional.
Envase: 110 bastoncitos




R3710-00
CERA DE UTILIDAD

Cera blandísima en tiras, que se dobla a la temperatura ambiente sin romperse. Gracias a su ductilidad y adherencia, está particularmente indicada para bordear las impresiones para obtener el zócalo del modelo.
Envase: 24 tiras



R3711-00
CERA PARA MODELAR

Cera en planchas con óptima flexibilidad y resistencia. Se modela tanto en frío como en caliente sin romperse.
Envase: 500 gr

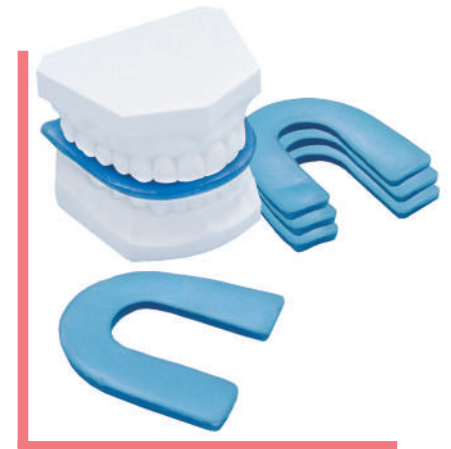

R3730-00
CERA DE MORDIDA

Indispensable para obtener el registro oclusal. El papel de aluminio evita imprecisiones.
Espesor 5 mm.
Envase: 24 piezas



R3714-00
**CERA TÉRMICA
PARA ALIVIAR RETENCIONES**

Punto de fusión a 104° C. Particularmente indicada para eliminar retenciones. No altera el brillo de la resina.
Envase: barra de 100 gr



R3713-00
CERA ADHESIVA

Alto poder adhesivo. Gracias a su elevada resistencia de cohesión permite fijar los varios dispositivos (tornillos, alambres, etc.) al modelo.
Envase: barra de 100 gr



R3716-00 CERA NATURAL PROTECTORA

Especial para ortodoncia. La composición natural de esta cera la convierte en absolutamente inocua y no provoca ninguna molestia si es ingerida.

Envase: 10 cajitas de 5 bastoncillos cada una



R0221-00 SOLDADURAS PARA ACERO INOXIDABLE

Formula apta para puentes y coronas. Sin cadmio. Plata 49%. Intervalo de fusión: 680°-705°C.

Envase: alambre diámetro 1 mm



SOLDADURAS ORTODÓNTICAS

R0222-00

En alambre diámetro 0,40 mm

R0223-00

En rollo 1 x 0,5 mm

R0224-00

En varilla diámetro 1 mm

Para todas las soldaduras ortodónticas. Sin cadmio. Plata: 55%. Intervalo de fusión: 630°-660°C.

Envase: 10 gr aprox.



R0225-00 DESOXIDANTE

En polvo para soldaduras R0220-00 y R0221-00.

Envase: 50 gr aprox.



R0226-00 FLUX

En pasta para soldaduras R0222-00, R0223-00 y R0224-00.

Envase: 30 gr aprox.



R0227-01 PASTA TERMOAISLANTE PARA SOLDADURAS

Para proteger del calor el yeso, los alambres, la resina durante la operación de soldadura.

Consistencia óptima, fácilmente removible con agua corriente.


Envase: 235 ml

new




R2300-95
KIT CUBETAS DE IMPRESIÓN

Cubetas de impresión realizadas en polipropileno, esterilizables en autoclave hasta 121°C. La forma anatómica y las retenciones presentes ofrecen al especialista una cubeta de impresión segura y manejable. Disponibles en 4 medidas diferentes, fácilmente reconocibles por los diferentes colores: rosa, amarillo, verde y naranja. El kit contiene 8 piezas entre superiores e inferiores, 1 pareja para cada medida.

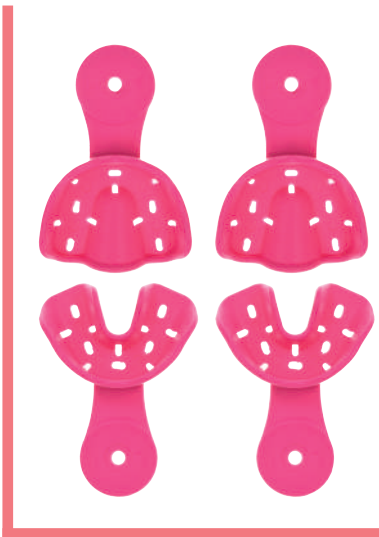


R2300-01
CUBETA DE IMPRESIÓN ROSA
Medida 1

En el envase hay 2 parejas de cubetas de impresión rosa correspondientes a la medida no. 1, la más pequeña.
Envase (4 piezas):
2 superiores y 2 inferiores

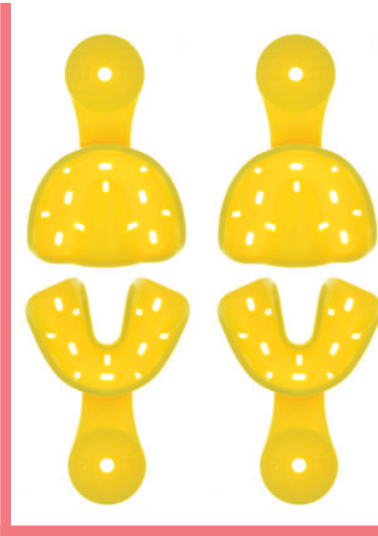


R2300-02
CUBETA DE IMPRESIÓN AMARILLA
Medida 2

En el envase hay 2 parejas de cubetas de impresión amarillas correspondientes a la medida no. 2.
Envase (4 piezas):
2 superiores y 2 inferiores

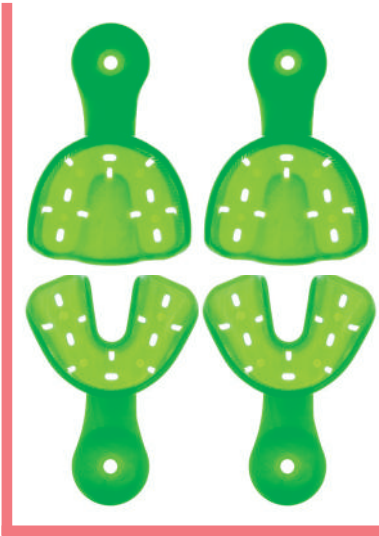

R2300-03
CUBETA DE IMPRESIÓN VERDE
Medida 3

En el envase hay 2 parejas de cubetas de impresión verdes correspondientes a la medida no. 3.
Envase (4 piezas):
2 superiores y 2 inferiores

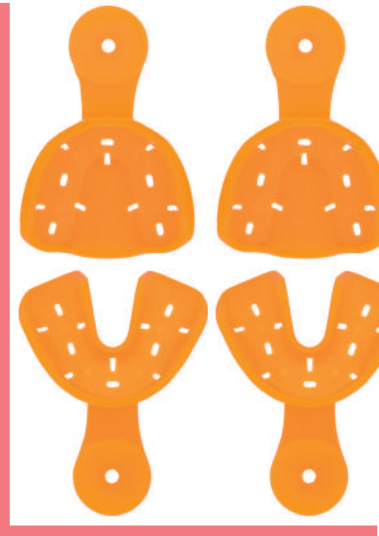

R2300-04
CUBETA DE IMPRESIÓN NARANJA
Medida 4

En el envase hay 2 parejas de cubetas de impresión naranjas correspondientes a la medida no. 4, la más grande.
Envase (4 piezas):
2 superiores y 2 inferiores