

SCAN POST E SCAN BODY INCLINED PLANE E PYRAMID*

Sono state introdotte due piccole modifiche sugli attuali Scan Post per migliorarne la gestione con i vari sistemi ottici di acquisizione intraorale:

- l'affiancamento degli Scan Body Inclined Plane nella versione grigia a quelli bianchi (così come era già per i Pyramid) aumenta la compatibilità di scansione con gli scanner da studio presenti sul mercato;
- l'opacizzazione del tratto transmucoso tramite un processo di microsabbiatura rende lo Scan Post rilevabile dagli scanner nella sua interezza senza possibili aree di discontinuità tra la gengiva e lo Scan Body.

I PREZZI RIMANGONO INVARIATI

- **Scan Post:** fabbricati in acciaio inossidabile con tratto transmucoso satinato
- **Scan Body:** fabbricati in materiale plastico
- per rilevare la posizione dell'impianto attraverso presa di impronta ottica intraorale o la digitalizzazione del modello in laboratorio
- autoclavabili



Confezione:

Inclined Plane

- 1 Scan Post
- 3 Scan Body Inclined Plane bianchi
- 3 Scan Body Inclined Plane grigi


Pyramid

- 1 Scan Post
- 3 Scan Body Pyramid bianchi
- 3 Scan Body Pyramid grigi

*Sul sito Leone sono scaricabili le librerie dei software CAD-CAM in cui il sistema Leone è presente: www.leone.it/implantologia

INCLINED PLANE

		
		
		
Ø connessione (mm)	2,2	3,0
Ø piattaforma protesica (mm)	3,3	4,1
 REF	141-3313-35	141-4113-35

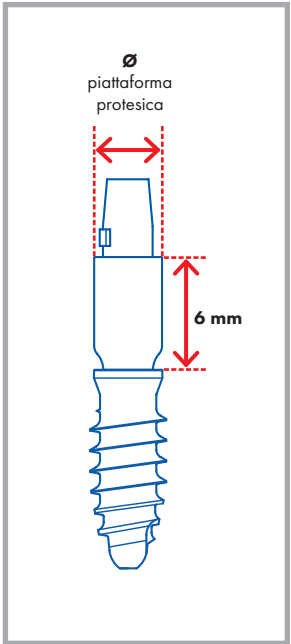

PYRAMID

		
		
		
Ø connessione (mm)	2,2	3,0
Ø piattaforma protesica (mm)	3,3	4,1
 REF	141-3313-51	141-4113-51

SCAN BODY INCLINED PLANE

- fabbricato in materiale plastico
- per Scan Post e Ti-Base
- autoclavabili

Confezione: 10 pezzi bianchi (5 bianchi e 5 grigi)



 REF **141-0000-35**

SCAN BODY PYRAMID

- fabbricato in materiale plastico
- per Scan Post e Ti-Base
- autoclavabili

Confezione: 10 pezzi bianchi (5 bianchi e 5 grigi)



 REF **141-0000-51**