


STRUMENTI PER RIMOZIONE IMPIANTI

Gli strumenti per rimozione impianti nascono per permettere la rimozione di un impianto che è rimasto bloccato nel sito implantare durante l'inserimento, nel caso in cui la forza trasmessa dal driver High Torque non sia sufficiente. Sono composti da un cricchetto che arriva a oltre 400 Ncm di torque e da due estrattori con filettatura inversa, antioraria con passo sinistrorso, uno per la connessione 2.2 (codice colore verde) e l'altro per la connessione 3.0 (codice colore giallo).

- Cricchetto: fabbricato in titanio grado medicale 5
- estrattori: fabbricati in acciaio inossidabile
- estrattore inverso **verde** per connessione 2.2
- estrattore inverso **giallo** per connessione 3.0
- cricchetto 400 Ncm: non deve essere smontato
- resistono a oltre 400 Ncm di torque
- autoclavabili

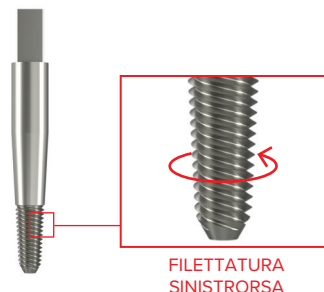

CRICCHETTO 400 Ncm

■ REF **156-1014-04**
EURO 182,00 +IVA



ESTRATTORE INVERSO 2.2

■ REF **156-1013-22**
EURO 53,60 +IVA



ESTRATTORE INVERSO 3.0

■ REF **156-1013-30**
EURO 53,60 +IVA



Per dettagli sull'utilizzo
visualizza il video tutorial