

**SISTEMA IMPLANTARE XCN<sup>®</sup>**

---

MONCONI PER  
PROTESI SU ATTACCHI  
E ACCESSORI

## MONCONI A TESTA SFERICA

---



### Ideali in caso di

---

- overdenture

### Caratteristiche

---

- fabbricati in titanio grado medicale 5
- emergenza con testa sferica per l'ancoraggio della protesi rimovibile tramite apposite cuffie
- testa sferica  $\varnothing$  2,15 mm
- autoclavabili

### Resistenti all'usura

---

La testa sferica dei monconi è rivestita in nitruro di titanio (TiN) in modo da aumentarne la resistenza all'usura.

### Facile parallelizzazione

---

I monconi a testa sferica Leone sono disponibili sia dritti che angolati a 15° con tre differenti altezze transmutose.

Il recupero dei disparallelismi è inoltre facilitato dalla connessione XCN® 360° dei monconi angolati. L'esagono staccato permette la rotazione a 360° sul modello da laboratorio e il suo fissaggio nella posizione prescelta guida il clinico nel posizionamento in bocca con la massima precisione.

## Ampia gamma di cuffie

In base alle esigenze del singolo caso è possibile scegliere tra diverse tipologie di cuffie:

- **cuffie in titanio anodizzato di colore rosaceo** per una migliore estetica all'interno della protesi **con cappette ritentive** in elastomero in tre rigidzze: morbida (bianca), media (arancione), rigida (viola)
- **cuffie in titanio con O-ring**
- **micro cuffie in titanio con micro O-ring**



CUFFIE  
IN TITANIO ANODIZZATO  
con:

- cappetta morbida (bianca)
- cappetta media (arancione)
- cappetta rigida (viola)



CUFFIE  
IN TITANIO  
con O-ring



MICRO CUFFIE  
IN TITANIO  
con micro O-ring


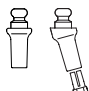
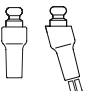
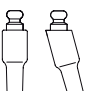
## Strumenti necessari


- scelta del moncone a testa sferica più idoneo con gli Abutment Gauge
- attivazione della connessione con il percussore con punta diritta o curva in titanio

## Confezione

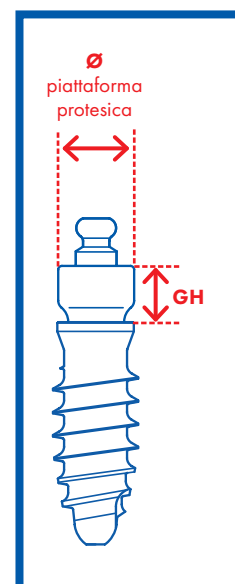
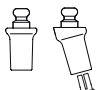
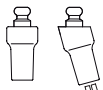
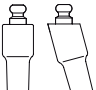
- 1 moncone
- 1 esagono (escluso i diritti)
- 1 cuffia con O-ring
- 1 cuffia con cappetta arancione
- 2 anelli distanziali per monconi

### Monconi a testa sferica

		1:1			
					
Ø connessione (mm)		2,2	2,2	2,2	
Ø piattaforma protesica (mm)		3,3	3,3	3,3	
GH (mm)		1,5	3	5	
REF	diritti	<b>123-3300-01</b>	<b>123-3300-03</b>	<b>123-3300-05</b>	
	angolati 15°	<b>123-3315-01</b>	<b>123-3315-03</b>	<b>123-3315-05</b>	



### Monconi a testa sferica

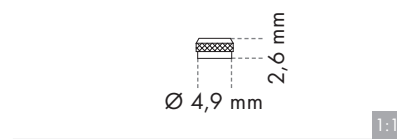
		1:1			
					
Ø connessione (mm)		3,0	3,0	3,0	
Ø piattaforma protesica (mm)		4,1	4,1	4,1	
GH (mm)		1,5	3	5	
REF	diritti	<b>123-4100-01</b>	<b>123-4100-03</b>	<b>123-4100-05</b>	
	angolati 15°	<b>123-4115-01</b>	<b>123-4115-03</b>	<b>123-4115-05</b>	

## CUFFIA CON CAPPETTA MORBIDA bianca

- cuffia fabbricata in titanio grado medicale 5
- cappetta morbida bianca premontata all'interno
- forza di ritenzione 5 N
- sterilizzabile a freddo

### Confezione:

- 2 cuffie con cappetta
- 2 anelli distanziali per monconi



REF **123-0004-05**

## CAPPETTA MORBIDA bianca

- fabbricata in elastomero
- ricambio per la cuffia con cappetta
- sterilizzabile a freddo

### Confezione: 6 pezzi



2:1

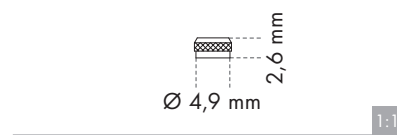
REF **123-0001-05**

## CUFFIA CON CAPPETTA MEDIA arancione

- cuffia fabbricata in titanio grado medicale 5
- cappetta media arancione premontata all'interno
- forza di ritenzione 10 N
- sterilizzabile a freddo

### Confezione:

- 2 cuffie con cappetta
- 2 anelli distanziali per monconi



REF **123-0004-06**

## CAPPETTA MEDIA arancione

- fabbricata in elastomero
- ricambio per la cuffia con cappetta
- sterilizzabile a freddo

### Confezione: 6 pezzi



2:1

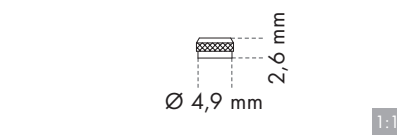
REF **123-0001-06**

## CUFFIA CON CAPPETTA RIGIDA viola

- cuffia fabbricata in titanio grado medicale 5
- cappetta rigida viola premontata all'interno
- forza di ritenzione 15 N
- sterilizzabile a freddo

### Confezione:

- 2 cuffie con cappetta
- 2 anelli distanziali per monconi



REF **123-0004-07**

## CAPPETTA RIGIDA viola

- fabbricata in elastomero
- ricambio per la cuffia con cappetta
- sterilizzabile a freddo

### Confezione: 6 pezzi



2:1

REF **123-0001-07**

## STRUMENTO PER MONTAGGIO CAPPETTA

- fabbricato in acciaio inossidabile
- per posizionare la cappetta all'interno dell'apposita cuffia

**Confezione:** 1 pezzo



1:1

REF **156-1004-00**

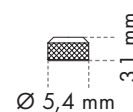
## CUFFIA CON O-RING

- fabbricata in titanio grado medicale 5
- O-ring premontato all'interno
- forza di ritenzione 10 N
- autoclavabile

**Confezione:**

1 cuffia con O-ring

1 anello distanziale per monconi



1:1

REF **123-0002-00**

## O-RING

- fabbricato in elastomero
- ricambio per la cuffia con O-ring
- autoclavabile

**Confezione:** 10 pezzi



2:1

REF **123-0001-00**

## MICRO CUFFIA CON MICRO O-RING

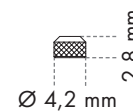
- fabbricata in titanio grado medicale 5
- micro O-ring premontato all'interno
- forza di ritenzione 10 N
- autoclavabile

**Confezione:**

1 micro cuffia con micro O-ring

1 anello distanziale per monconi (grigio)

1 anello distanziale per monoimpianti (bianco)



1:1

REF **123-0003-00**

## MICRO O-RING

- fabbricato in elastomero
- ricambio per la micro cuffia con micro O-ring
- autoclavabile

**Confezione:** 10 pezzi



2:1

REF **123-0001-01**