

Sshh..  
Sshh..

ho un segreto..

ideal Leone  
© LIGHT LINGUAL SYSTEM

# Il sistema linguale **Ideal Leone** è nato per trattare pazienti con lievi malposizioni o recidive che desiderano migliorare il loro sorriso con un trattamento invisibile, predicibile e veloce.



- Gli attacchi del sistema linguale **Idea-L** hanno minime dimensioni mesio-distali e uno spessore di solo 1,4 mm per assicurare il comfort e non alterare la fonasi del paziente fin dal primo giorno di trattamento.  
Il particolare design di questi brackets facilita l'applicazione della legatura **Slide™** e ne assicura il mantenimento della posizione durante la terapia.



- L'utilizzo della **Slide™** ha molteplici vantaggi:
  - **Slide™** si integra nel profilo dell'attacco e lo rende completamente privo di asperità
  - **Slide™** consente di sfruttare i vantaggi della biomeccanica Low Friction con l'applicazione di forze leggere
  - **Slide™** diminuisce i tempi terapeutici.



- Nella maggioranza dei casi l'impiego di un filo tondo **Memoria®** .012" risulta sufficiente per ottenere la risoluzione dell'affollamento ed il miglioramento estetico del sorriso.


In presenza di rotazioni dentali e/o malposizionamenti più marcati si possono adottare sia fili di dimensioni maggiori, **Memoria®** o Beta **Memoria®**, sia legature convenzionali frizionanti per aumentare il controllo biomeccanico.



- La sistemica **Idea-L**, progettata per una biomeccanica 2D con utilizzo di soli fili tondi non richiede complicati e costosi set up dei modelli.



- Per ottenere il perfetto allineamento e livellamento dei denti frontali è necessario un accurato posizionamento dei brackets; è quindi consigliabile una metodica indiretta sia con mascherine realizzate in laboratorio sia con i "Jig" appositamente ideati.
- La serie di altimetri di plastica è realizzata in sei misure per consentire la scelta della posizione più corretta in virtù dell'anatomia della superficie linguale del dente.

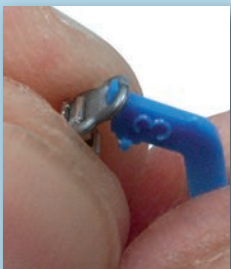

- Assemblaggio del Jig sull'attacco con la **Slide** agganciata sulla aletta gengivale
- Verifica sul modello della misura del Jig scelto
- Posizionamento in bocca e polimerizzazione dell'adesivo
- Rimozione del Jig con un movimento rotatorio
- **Attacco con la Slide inserita nell'aletta gengivale**
- Attacco con il filo inserito e la **Slide** in posizione

..porto  
un apparecchio  
ortodontico..

lo diresti?

ideal Leone  
O LIGHT LINGUAL SYSTEM

Inizio terapia



Risultato clinico dopo 3 mesi



- Cosmesi ortodontica del sorriso veloce ed invisibile per la cura di lievi malposizioni e recidive
- Biomeccanica Low Friction 2D per allineare e livellare i denti anteriori in poche settimane
- Attacchi di piccole dimensioni e ridotto spessore, utilizzati con legature **Slide™**, assicurano il massimo comfort del paziente
- Posizionamento pratico e preciso con lo specifico sistema di trasferimento
- Efficace alternativa agli aligners trasparenti
- Massimo rispetto della fonesi
- Minima collaborazione del paziente

Inizio terapia



Risultato clinico dopo 3 mesi



| SISTEMA IDEA-L |  |  |        |      |                           |
|----------------|--|--|--------|------|---------------------------|
|                |  |  | torque | ang. |                           |
|                |  |  |        |      | <br>.018"                 |
|                |  |  |        | 0°   | $\frac{1}{1}$<br>F4980-04 |
|                |  |  |        | 0°   | $\frac{2}{2}$<br>F4980-04 |
|                |  |  |        | 0°   | $\frac{3}{3}$<br>F4980-04 |
|                |  |  |        | 0°   | $\frac{4}{4}$<br>F4984-04 |
|                |  |  |        | 0°   | $\frac{1}{1}$<br>F4980-04 |
|                |  |  |        | 0°   | $\frac{2}{2}$<br>F4980-04 |
|                |  |  |        | 0°   | $\frac{3}{3}$<br>F4980-04 |
|                |  |  |        | 0°   | $\frac{4}{4}$<br>F4984-04 |

## Attacchi linguali IDEA-L


Confezioni da 5 pezzi



### F4980-91

## Kit attacchi linguali IDEA-L

Il kit contiene 8 attacchi (una arcata) e 12 legature *Slide*<sup>TM</sup>\* extra-small, colore argento

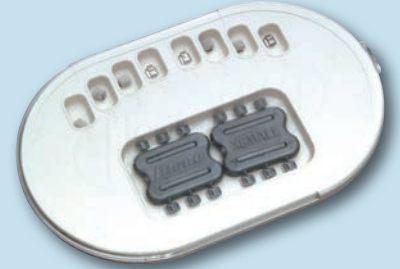

| ALTIMETRI PER ATTACCHI IDEA-L |          |             |
|-------------------------------|----------|-------------|
| misura                        | codice   |             |
| 1                             | F4900-01 | conf.<br>20 |
| 2                             | F4900-02 |             |
| 3                             | F4900-03 |             |
| 4                             | F4900-04 |             |
| 5                             | F4900-05 |             |
| 6                             | F4900-06 |             |



### F4900-60

## Kit altimetri per attacchi linguali IDEA-L

Confezione assortita da 120 pezzi




### K6264-10

## Legature *Slide*<sup>TM</sup>\* argento extra-small

Confezione da 10 moduli, da 6 legature ciascuno

| ARCHI LINGUALI MEMORIA®      |          |          |          | conf.<br>2 |
|------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| Ø inch                       | piccoli  | medi     | grandi   |            |
| .012                         | C4950-12 | C4951-12 | C4952-12 |            |
| .014                         | C4950-14 | C4951-14 | C4952-14 |            |
| ARCHI LINGUALI BETA MEMORIA® |          |          |          |            |
| .016                         | C4970-16 | C4971-16 | C4972-16 |            |

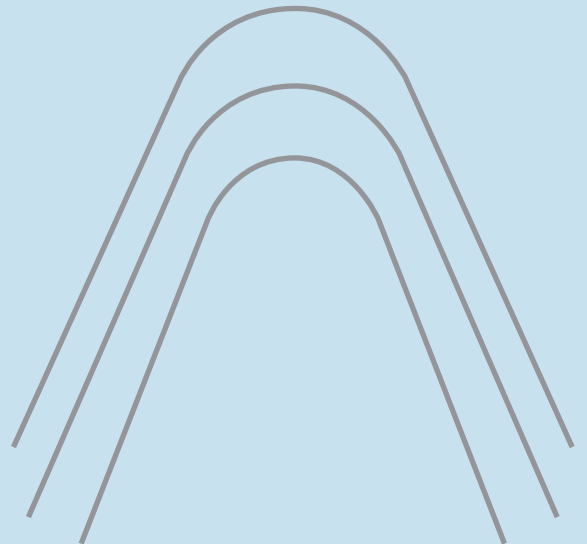

ideal  
O LIGHT LINGUAL SYSTEM

## LEONE S.p.a Ortodonzia e Implantologia

Via P. a Quaracchi, 50 - 50019 Sesto Fiorentino - FIRENZE - Tel. 055.30441 Fax 055.374808 info@leone.it www.leone.it

Ufficio Vendite Italia Tel. 055.304432 - 055.304433 Fax 055.374808 italia@leone.it