

Attacchi D.B. Self - Ligating

Precisione, controllo e versatilità

F1000Plus



InteractiveSL



 PROUDLY
MADE IN ITALY

Leone®



Una gamma completa di attacchi metallo D.B. Self Ligating, realizzati con tecnologia MIM® garanzia di precisione, controllo e versatilità, per un trattamento ortodontico biomeccanicamente performante.

Marcatura FDI

La marcatura laser dell'identificazione FDI sulla basetta con retina 80 mesh assicura l'immediata identificazione del bracket da posizionare sul dente corrispondente.

Massima igiene

Gli attacchi della linea Self Ligating Leone garantiscono un'igiene ottimale del paziente grazie all'assenza di legature elastiche che possono causare un accumulo di placca, con conseguenti irritazioni gengivali.

Slot .022"

La scelta di offrire questa gamma di bracket con slot .022" è in linea con le più recenti ricerche sulla biomeccanica in ortodonzia fissa e consente di utilizzare tutti gli archi della nostra gamma.

F1000Plus



InteractiveSL



Perchè **F1000**Plus?

Gli attacchi **F1000**Plus sono stati progettati per rispondere alle più sofisticate esigenze biomeccaniche, con l'obiettivo di una gestione clinica semplificata.

Il design dell'attacco è caratterizzato da un meccanismo autolegante passivo che assicura l'arco all'interno dello slot e, in base alla dimensione e alla geometria dell'arco, consente sia di sfruttare la meccanica Low Friction nelle fasi iniziali che, successivamente, favorire lo Sliding nella retrazione del gruppo frontale per poi consentire il completo controllo del Tip e del Torque nelle fasi finali del trattamento.

Gli attacchi **F1000**Plus, grazie alle caratteristiche descritte, sono biomeccanicamente efficienti consentendo di diminuire sia il tempo alla poltrona che della terapia favorendo così la soddisfazione e il massimo comfort del paziente.

Disponibile nelle tecniche Roth, MBT*, Damon**



Le caratteristiche

Unicità del meccanismo passivo

Il particolare design dello slot e dello sportellino consente il controllo nelle varie fasi terapeutiche, migliorando l'efficacia del trattamento ortodontico.



Forma Arrotondata

I bracket sono completamente arrotondati e senza spigoli garantendo il massimo confort del paziente.



Linea Centrale

Ogni attacco presenta una linea centrale verticale sullo sportellino che rende intuitivo l'allineamento con l'asse lungo del dente durante il bonding assicurando un posizionamento preciso.



Ganci a palla

Tutti gli attacchi per canini e premolari sono forniti con gancio a palla low profile per il massimo comfort.



Meccanismo di Apertura e Chiusura evoluto

L'innovativa tecnologia del meccanismo dello sportellino facilita le operazioni di apertura e chiusura in quanto non richiede di applicare pressione, minimizzando il disagio per il paziente e assicurando l'efficienza nella fase di sostituzione dell'arco.



Profilo del bracket

Se la situazione clinica dovesse richiederlo, grazie alla presenza delle apposite alette, il bracket **F1000Plus** consente l'applicazione di una legatura, elastica o metallica, che consentirà di aumentare la frizione ed esprimere totalmente le informazioni di Torque e Tip presenti nello slot.




Perché **Interactive**?

La specifica conformazione della clip e del bracket Interactive permette di modulare, in base alle necessità delle varie fasi del trattamento, il livello più appropriato di frizione tra attacco e filo.

Disponibile nelle tecniche Roth, MBT*


Fase passiva

Gli archi tondi iniziali risulteranno non vincolati dalla clip: la bassa frizione faciliterà la fase di allineamento e livellamento.

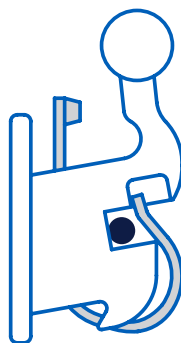


Fase interattiva

Gli archi rettangolari utilizzati nelle fasi di chiusura degli spazi, nel controllo delle rotazioni e del torque, deformano elasticamente la clip ottenendo il controllo biomeccanico necessario a queste fasi del trattamento.

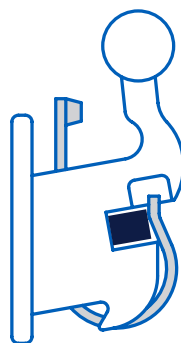

Fase attiva

Gli archi rettangolari per la rifinitura e il dettagliamento riempiono completamente lo slot andando in contatto attivo con la clip: ciò consente lo sfruttamento delle proprietà elastiche della stessa al fine di ottenere i movimenti minimali per la finitura del trattamento.

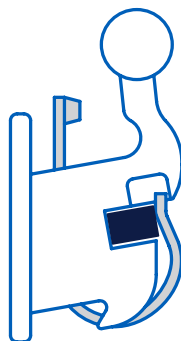


Facilità di apertura e chiusura

Non necessita di strumenti dedicati


Apertura

Inserire la punta di uno specillo o strumento di utilità nel foro presente nella clip ed esercitare un movimento in direzione occlusale.

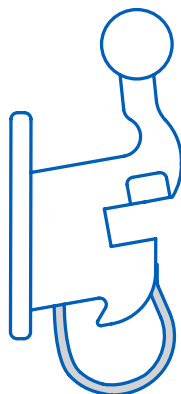

Chiusura

Far scorrere la clip con una leggera pressione in direzione gengivale utilizzando uno strumento a punta o semplicemente un dito.

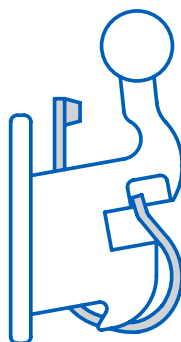

InteractiveSL

Le caratteristiche

Massimo Comfort e Versatilità

Gli attacchi self-ligating InterActive SL, grazie al loro design e alle dimensioni ridotte, offrono un trattamento altamente confortevole per il paziente, senza sacrificare il controllo. La clip interattiva assicura una efficiente gestione clinica del caso dovuta al controllo biomeccanico progressivo che consente di sfruttare la bassa frizione nelle fasi iniziali e al contempo ottenere il perfetto finishing con gli archi finali.



Materiale & Design

Il corpo dell'attacco è realizzato in acciaio biomedicale ed è saldato laser sulla basetta. Un punto colorato di identificazione disto-gengivale indica il quadrante di appartenenza dell'attacco, i codici colore sono gli stessi di tutti gli attacchi della gamma Leone.



Ganci a palla

Perfettamente sferici e low profile per il massimo comfort.



Clip a molla

Costruita in lega altamente elastica garantisce movimenti di apertura e chiusura semplici e sicuri. La porzione scorrevole della clip è vincolata tra la basetta e il corpo da una saldatura laser che ne evita la possibilità di distacco.



Slot smussato nelle porzioni mesio distali:

favorisce lo scorrimento dell'arco anche nel caso di forti disallineamenti evitando il notching e il binding.



Attacchi D.B. F1000Plus - Sistema ROTH .022"	20 attacchi 1 caso	200 attacchi 10 casi
---	-----------------------	-------------------------



F1000-93

F1001-93

Attacchi D.B. F1000Plus - Sistema MBT .022"	20 attacchi 1 caso	200 attacchi 10 casi
--	-----------------------	-------------------------



F1000-92

F1001-92

Attacchi D.B. F1000Plus - Sistema DAMON .022"	20 attacchi 1 caso	200 attacchi 10 casi
--	-----------------------	-------------------------



F1000-91

F1001-91

Attacchi D.B. InteractiveSL - Sistema ROTH .022"	20 attacchi 1 caso	200 attacchi 10 casi
---	-----------------------	-------------------------



F1100-91

F1101-91

Attacchi D.B. InteractiveSL - Sistema MBT .022"	20 attacchi 1 caso	200 attacchi 10 casi
--	-----------------------	-------------------------



F1100-92

F1101-92



Ricambi



Leone s.p.a.
 Via P. a Quaracchi 50, 50019
 Sesto Fiorentino | Firenze | Italia

Ufficio Vendite Italia:
 Tel. 055.3044600 | italia@leone.it
www.leone.it