

## SCAN POST E SCAN BODY INCLINED PLANE E PYRAMID\*

Sono state introdotte due piccole modifiche sugli attuali Scan Post per migliorarne la gestione con i vari sistemi ottici di acquisizione intraorale:

- l'affiancamento degli Scan Body Inclined Plane nella versione grigia a quelli bianchi (così come era già per i Pyramid) aumenta la compatibilità di scansione con gli scanner da studio presenti sul mercato;
- l'opacizzazione del tratto transmucoso tramite un processo di microsabbatura rende lo Scan Post rilevabile dagli scanner nella sua interezza senza possibili aree di discontinuità tra la gengiva e lo Scan Body.

### I PREZZI RIMANGONO INVARIATI

- **Scan Post:** fabbricati in acciaio inossidabile con tratto transmucoso satinato
- **Scan Body:** fabbricati in materiale plastico
- per rilevare la posizione dell'impianto attraverso presa di impronta ottica intraorale o la digitalizzazione del modello in laboratorio
- autoclavabili



### Confezione:

#### Inclined Plane


- 1 Scan Post
- 3 Scan Body Inclined Plane bianchi
- 3 Scan Body Inclined Plane grigi

#### Pyramid

- 1 Scan Post
- 3 Scan Body Pyramid bianchi
- 3 Scan Body Pyramid grigi

\*Sul sito Leone sono scaricabili le librerie dei software CAD-CAM in cui il sistema Leone è presente: [www.leone.it/implantologia](http://www.leone.it/implantologia)

INCLINED PLANE

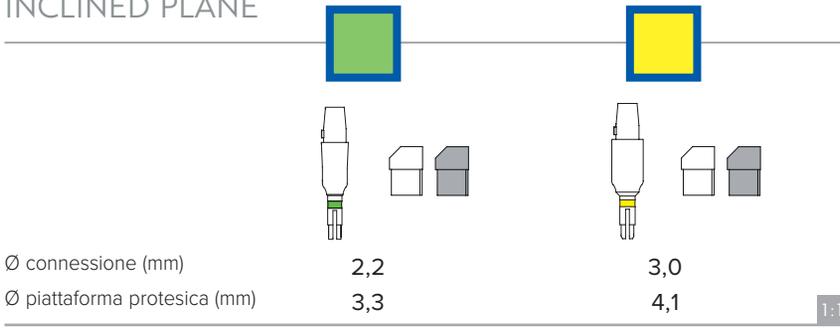

Ø connessione (mm)

2,2

3,0

Ø piattaforma protesica (mm)

3,3


4,1

1:1


REF

**141-3313-35**

**141-4113-35**

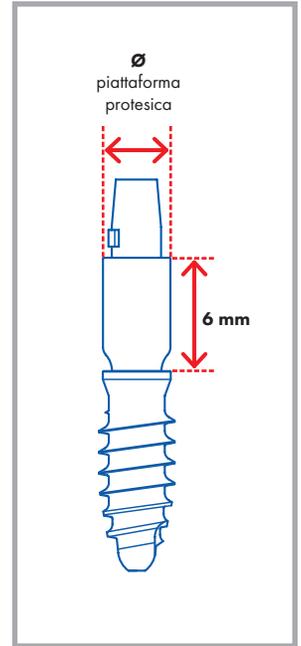

PYRAMID

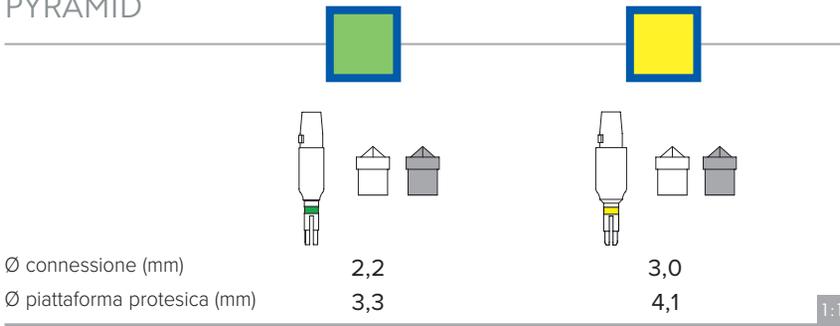

Ø connessione (mm)

2,2

3,0

Ø piattaforma protesica (mm)

3,3

4,1

1:1

REF

**141-3313-51**

**141-4113-51**

SCAN BODY INCLINED PLANE

- fabbricato in materiale plastico
- per Scan Post e Ti-Base
- autoclavabili

**Confezione:** 10 pezzi (5 bianchi e 5 grigi)



1:1

REF **141-0000-35**

SCAN BODY PYRAMID

- fabbricato in materiale plastico
- per Scan Post e Ti-Base
- autoclavabili

**Confezione:** 10 pezzi (5 bianchi e 5 grigi)



1:1

REF **141-0000-51**