



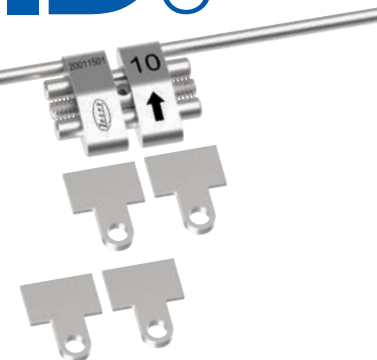

PATENTE EN TRAMITE

# RPE FOR TADs

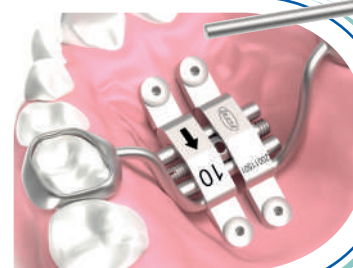

Ortodoncia e Implantología

**Leone S.p.a.**

Via P. a Quaracchi 50  
50019 Sesto Fiorentino | Firenze | Italia

**Departamento de Exportación:**

tel. +39 055.3044620 | fax +39 055.304405  
export@leone.it | www.leone.it

SP-04-20



Ortodoncia e Implantología

PATENTE EN TRAMITE

# RPE FOR TADs

Gracias a los casi 50 años de experiencia en la fabricación mecánica de RPE y a la atención de vanguardia a las últimas innovaciones tecnológicas y clínicas recientemente adoptadas para la expansión de los maxilares, Leone se enorgullece de lanzar el nuevo **RPE reforzado para TADs**. Junto con 4 aditamentos para TADs y una llave de activación dedicada, permite la fabricación a medida tanto de RPE Híbridos (de anclaje dentoalveolar) como de RPE de anclaje totalmente esquelético.



**COLOCACION PERSONALIZADA**  
y orientación de los  
accesorios del TAD



Activación con la  
**LLAVE ESPECIFICA REFORZADA**



Tornillo RPE  
**MAS FUERTE**  
resistente a más de 50kgf

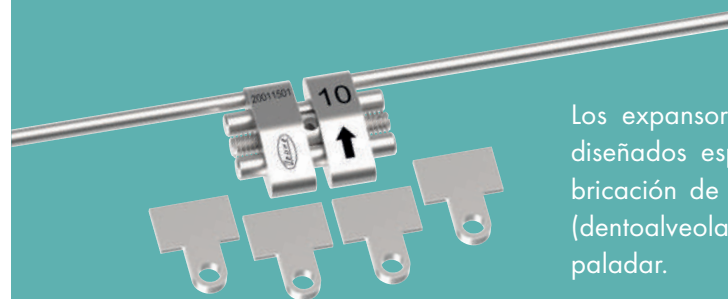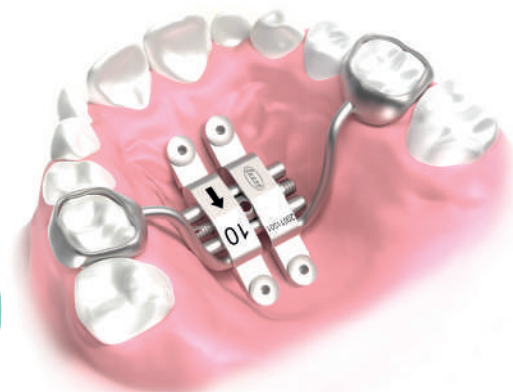




Los expansores **RPE FOR TADs** están diseñados específicamente para la fabricación de expansores tanto híbridos (dentoalveolar y TADs) como de anclaje paladar.

Tiene dos brazos posteriores y, en la confección, se incluyen cuatro aditamentos TADs que pueden ser adaptados a la anatomía del paciente y soldados por el laboratorio en el cuerpo del tornillo.

El expansor reforzado asegura una alta resistencia y fiabilidad durante toda la terapia.

Gracias a los aditamentos adaptables de los TADs, es posible personalizar en detalle el RPE a la anatomía de cada paciente, tanto en el método Pin Last como en el Pin First. Por lo tanto, se puede lograr una distribución optimizada de la carga de expansión en los TADs.

Disponemos de alicates dedicados para la personalización de los accesorios de los TADs.

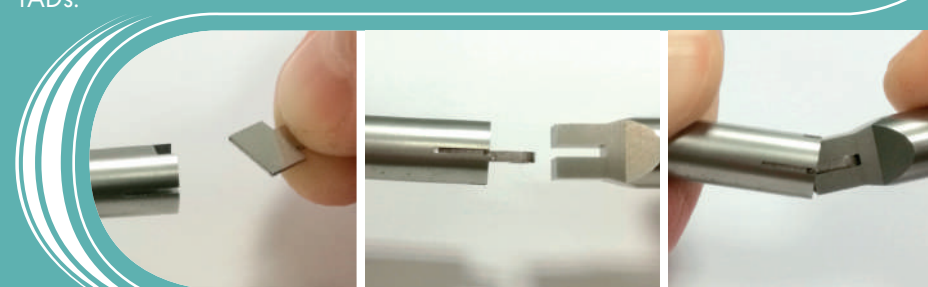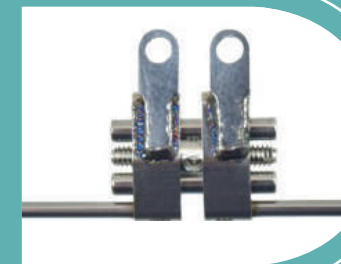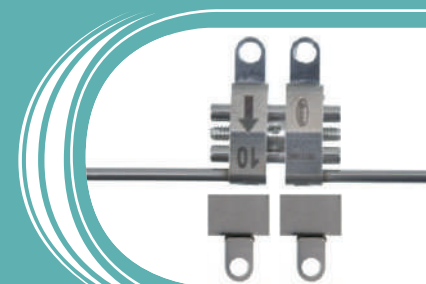

REF **201A0620-08** EXPANSOR PALATAL 8 mm PARA TADS  
REF **201A0620-10** EXPANSOR PALATAL 10 mm PARA TADS  
REF **201A0620-12** EXPANSOR PALATAL 12 mm PARA TADS  
REF **P0201-00** LLAVE DE ACTIVACION PARA TADS