

# Prótesis conométrica


**XCN<sup>®</sup>**





# Pilares MUA-Conic para prótesis conométrica


# Prótesis conométrica

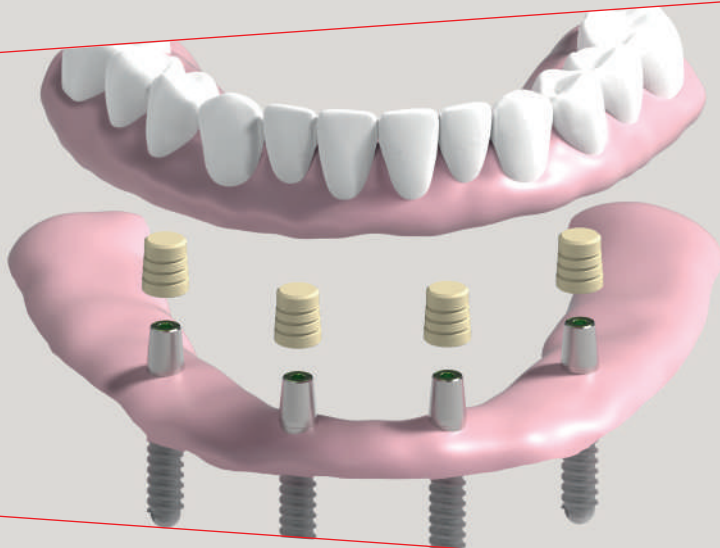


## VENTAJAS

- Prótesis sin cemento gracias a la remoción extraoral de los residuos de cemento
- Prótesis sin tornillos de conexión y de agujeros de acceso correspondientes
- Prótesis fácilmente removible para controles periódicos e higiene oral
- Elevada estabilidad de la prótesis gracias a la fricción cónica
- Sellado de la interfase para una mejor salud de los tejidos blandos periimplantarios

# Innovador acoplamiento Titanio – PEEK

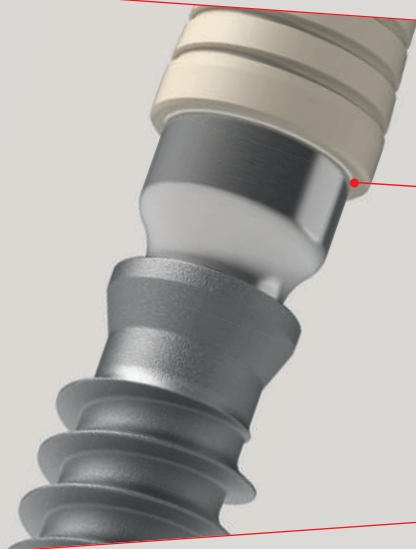

MEJOR AGARRE  
MAYOR SELLADO

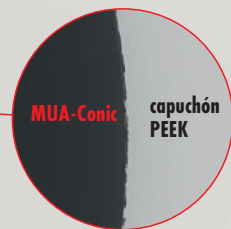


(Imagen SEM 600x)

## CUANDO

- Edentulismo parcial (puentes en la zona del canino, del premolar y del molar)
- Edentulismo total (prótesis fijas y removibles)
- Carga inmediata

# Características

Emergencia cónica con semiángulo de 5°

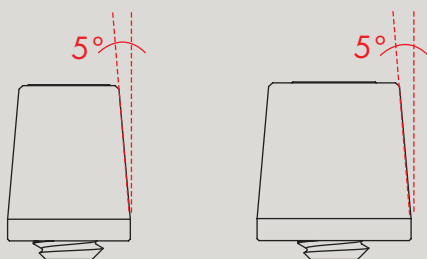


Amplia gama de angulaciones  
(0°, 7.5°, 15°, 25°, 35°)  
y alturas gingivales



Adaptabilidad a cualquier situación clínica  
gracias a la conexión XCN® 360°



Reversibilidad del pilar MUA-Conic  
en pilar MUA en cualquier momento  
del tratamiento, pasando de una prótesis  
conométrica a una prótesis atornillada

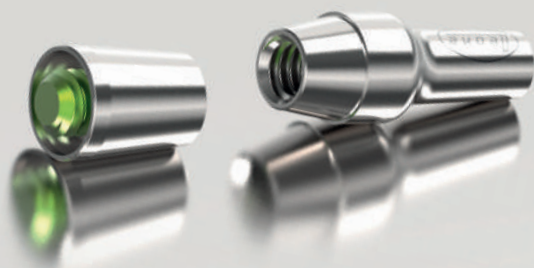

# Capuchones conométricos preformados

El sistema ofrece tres diferentes tipologías de capuchones para tres distintos usos: capuchón FIXED para prótesis fija, capuchón MOBILE para sobredentadura y capuchón WELD para soldadura intraoral

Capuchón Fixed



Capuchón Mobile







Capuchón Weld







# Reporte de caso Conometría fija

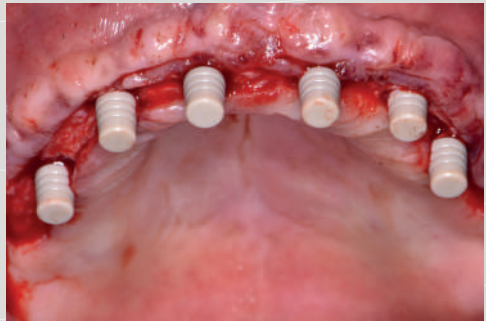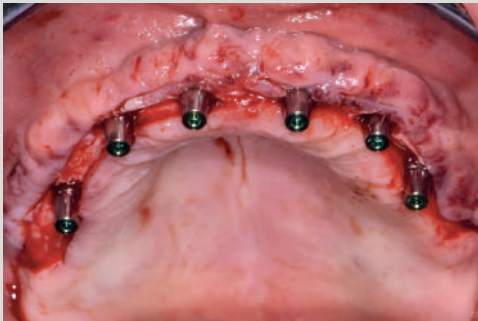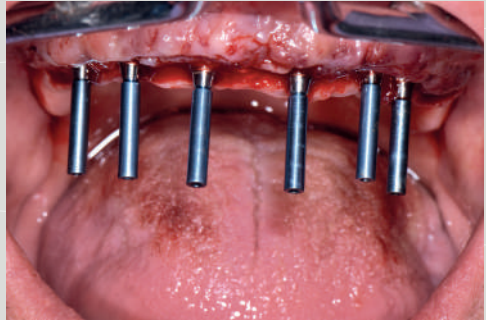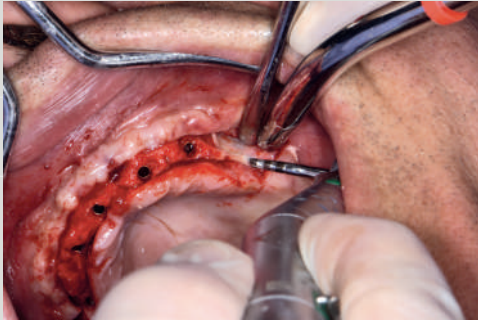

Cortesía del Dr. Giuseppe Musiello  
y Tpd. Pasquale Martino

# Reporte de caso




## Conometría removible

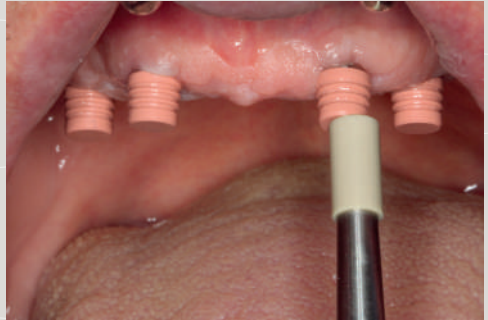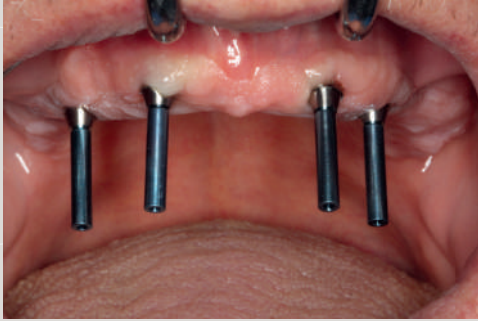

Cortesía del Dr. Salvatore Belcastro  
y Laboratorio Monni & C.

# Reporte de caso

## Conometría electrosoldada

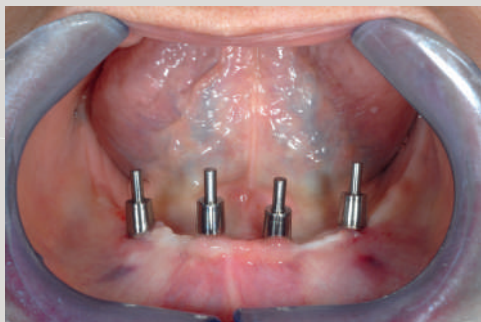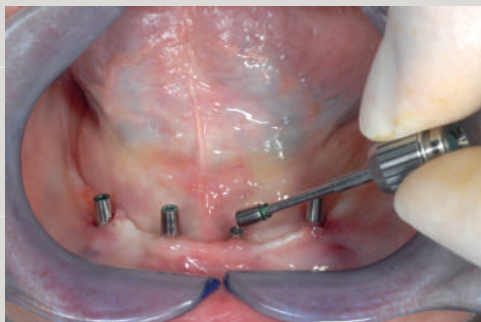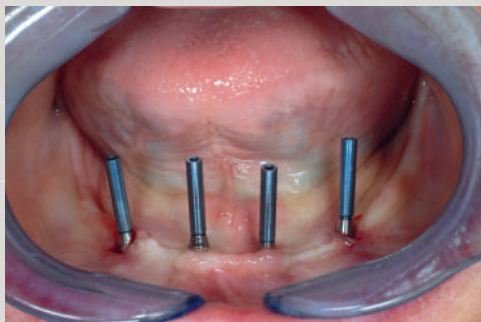

Cortesía del Dr. Umberto Stella  
y Tpd. Vaniel Fogli (Laboratorio Eurodental)



CONSULTE LA BIBLIOGRAFÍA COMPLETA  
EN LA PÁGINA WEB:

[WWW.LEONE.IT](http://WWW.LEONE.IT)

**XCN<sup>®</sup>**

**SOLO SONRISAS REALES**



**Leone S.p.a.**

Via P. a Quaracchi 50

50019 Sesto Fiorentino | Firenze | Italia

**Export Dept.:**

Phone: +39.055.3044620 | Fax: +39.055.304405  
export@leone.it | www.leone.it