

SISTEMA IMPLANTARE

XCN[®]

MONCONI PER
PROTESI SU ATTACCHI
E ACCESSORI



MONCONI A TESTA SFERICA



Ideali in caso di

- overdenture
- nel mascellare superiore necessari almeno quattro impianti di supporto
- nel mascellare inferiore necessari almeno due impianti di supporto

Caratteristiche

- fabbricati in titanio grado medicale 5
- emergenza con testa sferica per l'ancoraggio della protesi rimovibile tramite apposite cuffie
- testa sferica Ø 2,15 mm
- autoclavabili

Resistenti all'usura

La testa sferica dei monconi è rivestita in nitrato di titanio (TiN) in modo da aumentarne la resistenza all'usura.


Semplice igiene

La testa sferica priva di fori ciechi e incavi, grazie all'assenza di una vite di connessione, facilita l'igiene quotidiana.



Eccellente stabilità della protesi

La cuffia con cappetta dispone di una ampia superficie di appoggio sia sulla testa che sul collo del moncone, impedendo il basculamento della protesi.

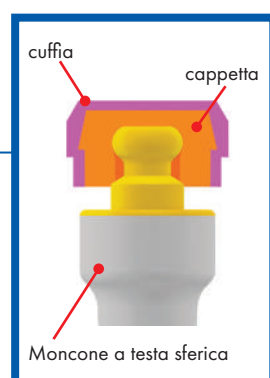

Facile parallelizzazione


I monconi a testa sferica Leone sono disponibili sia dritti che angolati a 15° con tre differenti altezze transmucose.

Il recupero dei disparallelismi è inoltre facilitato dalla connessione XCN® 360° dei monconi angolati. L'esagono staccato permette la rotazione a 360° sul modello da laboratorio e il suo fissaggio nella posizione prescelta guida il clinico nel posizionamento in bocca con la massima precisione.

Ampia gamma di cuffie

In base alle esigenze del singolo caso è possibile scegliere tra diverse tipologie di cuffie:

- **cuffie in titanio anodizzato di colore rosaceo** per una migliore estetica all'interno della protesi **con cappette ritentive** in elastomero in tre rigidità: morbida (bianca), media (arancione), rigida (viola)
- **cuffie in titanio con O-ring**
- **micro cuffie in titanio con micro O-ring**

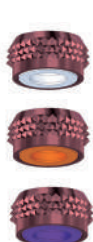

CUFFIE
IN TITANIO ANODIZZATO
con:
- cappetta morbida (bianca)
- cappetta media (arancione)
- cappetta rigida (viola)



CUFFIE
IN TITANIO
con O-ring



MICRO CUFFIE
IN TITANIO
con micro O-ring

Strumenti necessari




- scelta del moncone a testa sferica più idoneo con gli Abutment Gauge
- attivazione della connessione con il percussore con punta diritta o curva in titanio


Confezione

- 1 moncone
- 1 esagono (escluso i diritti)
- 1 cuffia con O-ring
- 1 cuffia con cappetta arancione
- 2 anelli distanziali per monconi






Monconi a testa sferica

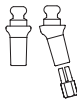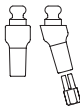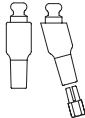				 1:1
Ø connessione (mm)		2,2	2,2	2,2
Ø piattaforma protesica (mm)		3,3	3,3	3,3
GH (mm)		1,5	3	5
REF	diritti	123-3300-01	123-3300-03	123-3300-05
	angolati 15°	123-3315-01	123-3315-03	123-3315-05

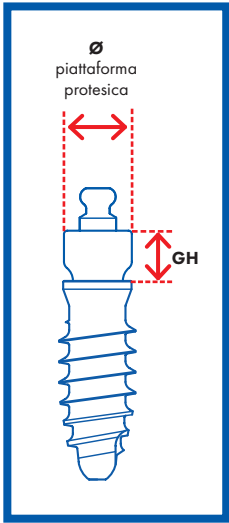

Monconi a testa sferica

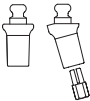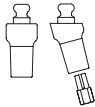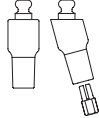				 1:1
Ø connessione (mm)		3,0	3,0	3,0
Ø piattaforma protesica (mm)		4,1	4,1	4,1
GH (mm)		1,5	3	5
REF	diritti	123-4100-01	123-4100-03	123-4100-05
	angolati 15°	123-4115-01	123-4115-03	123-4115-05




CUFFIA CON CAPPETTA MORBIDA bianca

- cuffia fabbricata in titanio grado medicale 5
- cappetta morbida bianca premontata all'interno
- forza di ritenzione 5 N
- sterilizzabile a freddo

Confezione:

- 2 cuffie con cappetta
- 2 anelli distanziali per monconi

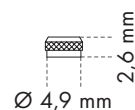

1:1

REF **123-0004-05**

CAPPETTA MORBIDA bianca

- fabbricata in elastomero
- ricambio per la cuffia con cappetta
- sterilizzabile a freddo

Confezione: 6 pezzi



2:1


REF **123-0001-05**

CUFFIA CON CAPPETTA MEDIA arancione

- cuffia fabbricata in titanio grado medicale 5
- cappetta media arancione premontata all'interno
- forza di ritenzione 10 N
- sterilizzabile a freddo

Confezione:

- 2 cuffie con cappetta
- 2 anelli distanziali per monconi

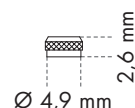

1:1

REF **123-0004-06**

CAPPETTA MEDIA arancione

- fabbricata in elastomero
- ricambio per la cuffia con cappetta
- sterilizzabile a freddo

Confezione: 6 pezzi



2:1


REF **123-0001-06**

CUFFIA CON CAPPETTA RIGIDA viola

- cuffia fabbricata in titanio grado medicale 5
- cappetta rigida viola premontata all'interno
- forza di ritenzione 15 N
- sterilizzabile a freddo

Confezione:

- 2 cuffie con cappetta
- 2 anelli distanziali per monconi

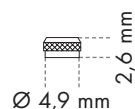

1:1

REF **123-0004-07**

CAPPETTA RIGIDA viola

- fabbricata in elastomero
- ricambio per la cuffia con cappetta
- sterilizzabile a freddo

Confezione: 6 pezzi



2:1

REF **123-0001-07**

STRUMENTO PER MONTAGGIO CAPPETTA

- fabbricato in acciaio inossidabile
- per posizionare la cappetta all'interno dell'apposita cuffia

Confezione: 1 pezzo



1:1


REF **156-1004-00**

CUFFIA CON O-RING

- fabbricata in titanio grado medicale 5
- O-ring premontato all'interno
- forza di ritenzione 10 N
- autoclavabile

Confezione:

- 1 cuffia con O-ring
- 1 anello distanziale per monconi

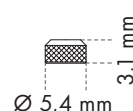

1:1

REF **123-0002-00**

O-RING

- fabbricato in elastomero
- ricambio per la cuffia con O-ring
- foro interno Ø 1,5 mm
- esterno Ø 4,4 mm
- autoclavabile

Confezione: 10 pezzi



2:1


REF **123-0001-00**

MICRO CUFFIA CON MICRO O-RING

- fabbricata in titanio grado medicale 5
- micro O-ring premontato all'interno
- forza di ritenzione 10 N
- autoclavabile

Confezione:

- 1 micro cuffia con micro O-ring
- 1 anello distanziale per monconi (grigio)
- 1 anello distanziale per monoimpianti (bianco)

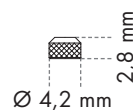

1:1

REF **123-0003-00**

MICRO O-RING

- fabbricato in elastomero
- ricambio per la micro cuffia con micro O-ring
- foro interno Ø 1,5 mm
- esterno Ø 3,6 mm
- autoclavabile

Confezione: 10 pezzi




2:1


REF **123-0001-01**

MISURE DEL TRATTO TRANSMUCOSO DEI MONCONI


È possibile consultare le tabelle relative alle misure del tratto transmucoso della gamma dei monconi Leone inquadrando il codice QR con il proprio smartphone, oppure collegandosi al seguente link: www.leone.it/info-transmucoso

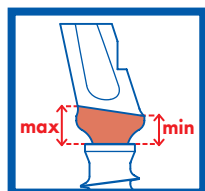


ANATOMICI 360°

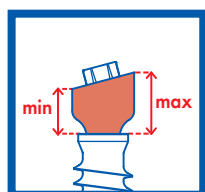


EXACONNECT

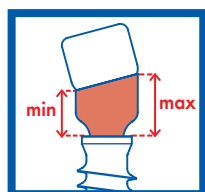


EXACONNECT Plus

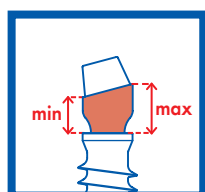

MUA / MUA-CONIC

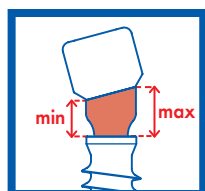

MUA Plus

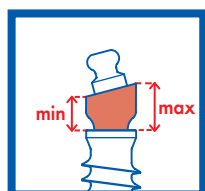

TESTA SFERICA